

Brug af lunge monitor

1 Sæt batterierne ind fra bagsiden



Kontakt

2 Monter mundstykket ovenpå apparatet




3 Tænd for apparatet.




4 Pust ind i mundstykket i 6 sekunder

- Træk vejret så dybt ind, som muligt.
- Sæt røret for munden og bid forsigtigt om røret.
- Pust så hårdt som muligt i 6 sekunder.

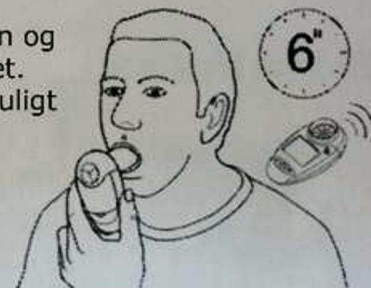

5 Pust yderligere 2 gange i mundstykket

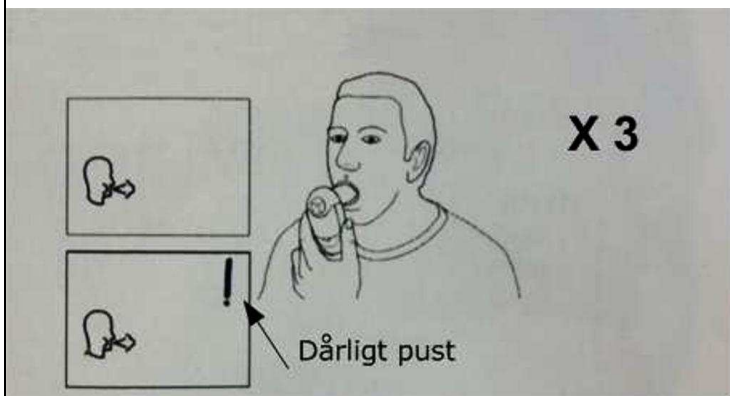

6 Tryk på den midterste knap

Normal

Pilen viser
Det bedste pust



- Batterierne skal vendes som vist på billede 1
- Mundstykket vendes, som vist på billede 2. Indsatsen i mundstykket skal sidde i den ende, hvor du skal puste.
- Hold tænd/sluk knappen nede i et sekund for at tænde.
- Hvis der vises en lodret streg i højre hjørne af skærmen, er målingen ikke god.
- Når du har foretaget 3 målinger, kan du trykke på den midterste knap for at se den bedste måling.
- Hvis du skal se de gemte målinger, skal du holde den midterste knap nede i 3 sekunder.